


CHIRALCEL OJ-RH カラム 取扱説明書



ご使用の前に必ずお読み下さい

カラムの詳細

カラムエンド : ウォーターズタイプ
不斉識別剤 : Cellulose tris(4-methylbenzoate)
(シリカゲルコーティング型)
粒子径 : 5 μm
出荷時の封入溶媒 : 水 / アセトニトリル = 80 / 20 (v/v)

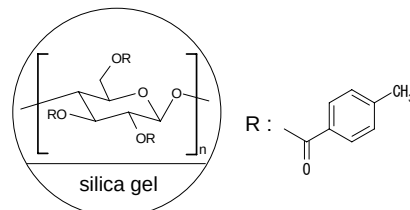

不斉識別剤の構造

(カラムは全て出荷前に品質検査を実施しています。検査条件と検査結果およびカラムロット番号は同封の品質検査レポートをご参照下さい。)

注 意:

本カラムを HPLC 装置に接続する前に、必ず装置全体（インジェクターやインジェクションループを含む）を、2 頁目記載の推奨溶媒に従った移動相もしくはカラム保管溶媒に完全に置換して下さい。（特に、オートサンプラーのシリンジやニードルの洗浄液の溶媒置換は見落としがちです。ご注意ください。）装置中に、アセトン、クロロホルム、ジメチルホルムアミド（DMF）、ジメチルスルホキシド（DMSO）、酢酸エチル、塩化メチレン、THF など、HPLC 用の移動相として一般的に用いられている溶媒が、たとえ微量でも混入していると、カラムを破壊する恐れがあります。

カラム使用条件

カラムサイズ (内径×長さ)	2.1 x 150 mm 細径カラム	4.6 x 150 mm 分析用カラム	20 x 150 mm セミ分取カラム
通液方向	カラムのタグに明示されています。		
圧力 ^①	カラムを長くお使い頂くため、30MPa（～ 305 kgf/cm ² ）を超えない圧力でのご使用をお勧めします。		
pH ^②	pH 2.0 ～ 9.0		
温度範囲 ^②	5 ～ 40℃		

- ① 圧力とはカラム本体にかかる背圧のことで、カラムを HPLC 装置に接続して通液した場合の系内全体の圧力から、同条件でカラムを接続せずに通液した場合の圧力を差し引いた値です。
- ② pH 7.0 以上でご使用になる時は、カラム温度は 25℃以下にして下さい。またカラム保護のため必ずガードカートリッジをご使用ください。

重要注意事項

- ⇒ 本取扱説明書の内容は、他のダイセルのキラルカラムには適用できません。
- ⇒ カラムを長くお使い頂くために、専用のガードカートリッジをご使用下さい。
- ⇒ カラムに強い衝撃を与えたり、カラムを分解しないで下さい。
- ⇒ 本カラムの使用に関するご質問、あるいはカラムに関するトラブルについては、キラルヘルプデスク（0120-780-104）または末尾記載の連絡先までお問い合わせ下さい。
- ⇒ 本書の内容に従いカラムを取扱うことで、カラムを長くお使い頂くことができます。

推奨移動相条件

下記以外の溶媒をご使用になりたい場合は、弊社までお問い合わせ下さい。

A 移動相

		酸性化合物	中性化合物	塩基性化合物 ^④
CHIRALCEL OJ-RH	水溶液 ^①	ギ酸水溶液 pH 2.0	水	DEA で pH 9.0 に調整した 20mM NH_4HCO_3 水溶液
	有機溶媒 ^②	CH_3CN 、 MeOH 、 EtOH 、IPA		
	標準的な 移動相組成 ^③	水溶液 / 有機溶媒 = 60 / 40		

DEA : ジエチルアミン、 NH_4HCO_3 : 炭酸水素アンモニウム、 CH_3CN : アセトニトリル、 MeOH : メタノール
 EtOH : エタノール、IPA : 2-プロパノール

- ① 上記移動相で十分な分離が得られない場合には下記の水溶液をお試し下さい。水溶液の調製は、次頁記載の「B 水溶液の調製法 (例)」をご参照下さい。

	酸性化合物	塩基性化合物
CHIRALCEL OJ-RH	50～100mM リン酸緩衝液 pH 2.0	100mM KPF ₆ （または NaPF ₆ ）水溶液
	リン酸水溶液 pH 2.0	
	リン酸で pH 2.0 に調整した 100mM KPF ₆ （または NaPF ₆ ）水溶液	

- ② ☐ 一般に、有機溶媒の溶出力は、アセトニトリル、2-プロパノール、エタノール、メタノールの順です。
☐ 有機溶媒としてアルコールを使用した場合、アセトニトリルに比べて背圧が高くなりますのでご注意下さい。
☐ カラム性能を劣化させる恐れがありますので表記以外の有機溶媒をご使用にならないで下さい。
- ③ ☐ 移動相は、ご使用する前に 0.5 μm 程度の多孔質メンブレンフィルターで濾過して下さい。
☐ 移動相は、水溶液とアセトニトリルの混合液 (組成比 60/40 (v/v)) から検討を始めることをお勧めします。
試料の溶出時間を調節したい場合は、移動相の組成比を調整して下さい。
☐ カラム温度を下げると、保持時間が長くなり分離係数が向上する場合があります。
☐ カラム温度を上げて流速を下げると、分離度が向上する場合があります。
☐ 有機溶媒は下表の範囲でご使用いただけますが、移動相の有機溶媒組成比が高くなると塩が析出しカラムの詰りの原因となります。

水溶液 / 有機溶媒
90 / 10 ~ 0 / 100

- ④ ☐ シリカゲルの劣化を避けるため、強塩基性水溶液 (pH>9.0) は使用しないで下さい。
☐ pH 7.0 以上でご使用になる時は、カラム温度は 25℃以下にして下さい。またカラム保護のため必ずガードカートリッジをご使用ください。
☐ 塩基性が非常に強い試料は、シリカゲルを劣化させる恐れがあります。

B 水溶液の調製法（例）

ギ酸水溶液（pH 2.0）の調製

⇒ 水（HPLC グレード）にギ酸を添加して pH 2.0 に調整する。

炭酸水素アンモニウム水溶液（pH 9.0）の調製

- A 液: 20mM 炭酸水素アンモニウム水溶液
0.79g NH_4HCO_3 / FW 79.06 を水（HPLC グレード）で溶解し、500ml の水溶液にする。
- B 液: ジエチルアミン
⇒ A 液に B 液を添加し、pH を 9.0 に調整する。

100mM KPF_6 水溶液 および 100mM KPF_6 水溶液（pH 2.0）の調製

- A 液: 100mM ヘキサフルオロリン酸カリウム水溶液
9.20g KPF_6 / FW 184.07 を水（HPLC グレード）に溶解し、500ml の水溶液にする。
- B 液: リン酸（85wt% の H_3PO_4 ）
⇒ A 液に B 液を添加し、pH を 2.0 に調整する。

リン酸緩衝液（pH 2.0）の調製

- A 液: 50mM リン酸二水素カリウム水溶液
3.40g KH_2PO_4 / FW 136.09 を水（HPLC グレード）に溶解させ、500ml の水溶液にする。
- B 液: リン酸（85wt% の H_3PO_4 ）
⇒ A 液に B 液を添加し、pH を 2.0 に調整する。

試料の調製

- 試料は可能な限り移動相に溶かし、0.5 μm 程度の多孔質メンブレンフィルターで濾過してからご使用下さい。

カラムの洗浄・保管

- 酸または塩を含む移動相で使用了後は、それらを含まない同一の組成の移動相をカラムに通液し、完全に除去して下さい。
- 有機溶媒組成の高い移動相に置換する場合は、HPLC 装置とカラムを水/有機溶媒混合液で洗浄し、塩類を完全に除去して下さい。
- 試料が吸着した場合、アセトニトリルを 0.5ml/min.（内径 4.6mm カラムの場合）の流速で 2 時間程度通液して下さい。試料がメタノールに溶解しやすい場合は、メタノールを通液して下さい。
- 水/アセトニトリル混合液（組成比 80/20（v/v））に置換してカラムを保管して下さい。

主要な多糖系キラルカラム 製品一覧

※一覧表に掲載されていないキラルカラムがございます。弊社HPをご覧ください。

カラム名	移動相		粒子径		
	順相	逆相	3 μ m	5 μ m	10 μ m
耐溶剤型 3 μ m 高段数シリーズ	CHIRALPAK IA-3	◆	◆		
	CHIRALPAK IB-3	◆	◆		
	CHIRALPAK IC-3	◆	◆		
耐溶剤型 5 μ m Iシリーズ	CHIRALPAK IA	◆		◆	
	CHIRALPAK IB	◆		◆	
	CHIRALPAK IC	◆		◆	
	CHIRALPAK ID	◆		◆	
順相用 3 μ m 高段数シリーズ	CHIRALPAK AD-3	◆	◆		
	CHIRALPAK AS-3	◆	◆		
	CHIRALPAK AY-3	◆	◆		
	CHIRALCEL OD-3	◆	◆		
	CHIRALCEL OJ-3	◆	◆		
	CHIRALCEL OZ-3	◆	◆		
順相用 5 μ m Hシリーズ	CHIRALPAK AD-H	◆		◆	
	CHIRALPAK AS-H	◆		◆	
	CHIRALPAK AY-H	◆		◆	
	CHIRALPAK AZ-H	◆		◆	
	CHIRALCEL OD-H	◆		◆	
	CHIRALCEL OJ-H	◆		◆	
	CHIRALCEL OX-H	◆		◆	
	CHIRALCEL OZ-H	◆		◆	
	CHIRALCEL OB-H	◆		◆	
	CHIRALCEL OC-H	◆		◆	
逆相用 3 μ m 高段数シリーズ	CHIRALPAK AD-3R		◆		
	CHIRALPAK AS-3R		◆		
	CHIRALPAK AY-3R		◆		
	CHIRALCEL OD-3R		◆		
	CHIRALCEL OJ-3R		◆		
	CHIRALCEL OZ-3R		◆		
逆相用 5 μ m RHシリーズ	CHIRALPAK AD-RH			◆	
	CHIRALPAK AS-RH			◆	
	CHIRALPAK AY-RH			◆	
	CHIRALPAK AZ-RH			◆	
	CHIRALCEL OD-RH			◆	
	CHIRALCEL OJ-RH			◆	
	CHIRALCEL OZ-RH			◆	

分取用途として、20 μ mの充填剤を充填した大型カラム（内径 50mm）もご用意しています。

各キラルカラムの詳細については、
弊社ホームページ（<http://www.daicelchiral.com/>）を併せご覧ください。

CHIRALCEL, CHIRALPAK, CROWNPAC は、株式会社ダイセルの登録商標です。

株式会社ダイセル

CPI カンパニー： 〒108-8230 東京都港区港南 2-18-1 TEL: 03-6711-8222 FAX: 03-6711-8228
〒530-0001 大阪市北区梅田 3-4-5 TEL: 06-6342-6161 FAX: 06-6342-6168